


# LET’S MOVE AGAIN.
# OUTDOOR ROLLATOR.

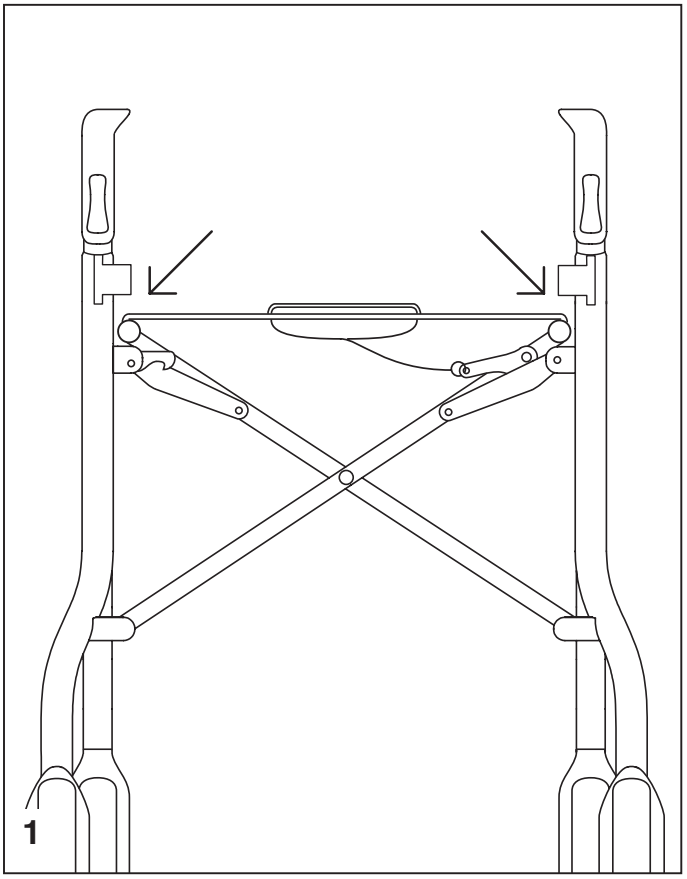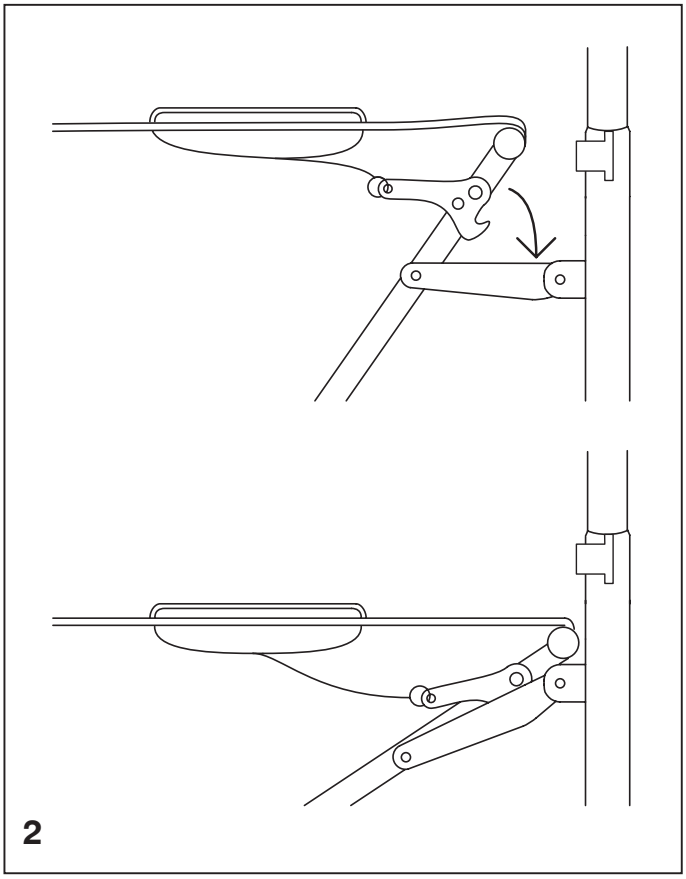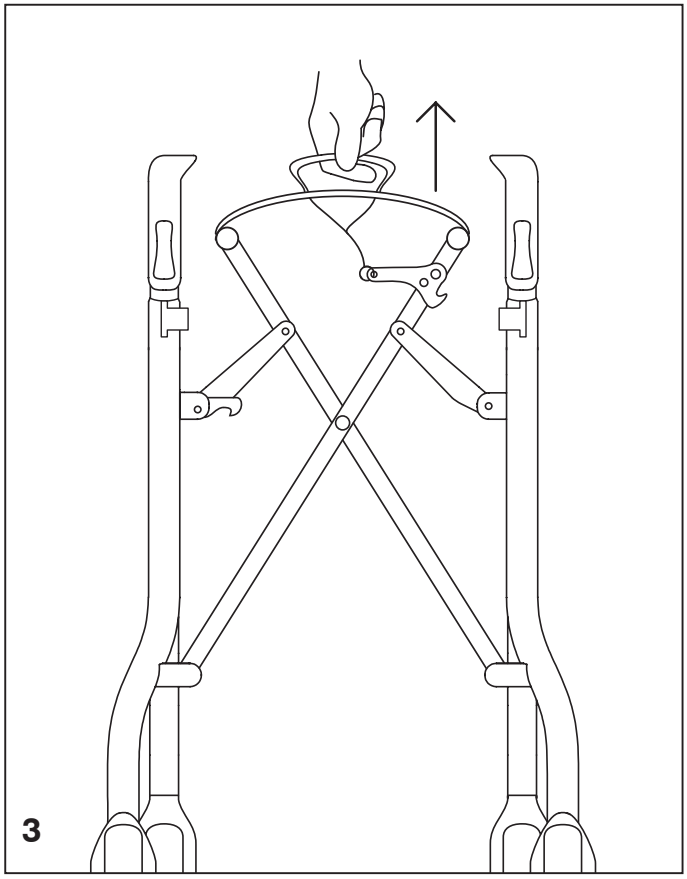



User Manual
June 2026


1



2


3

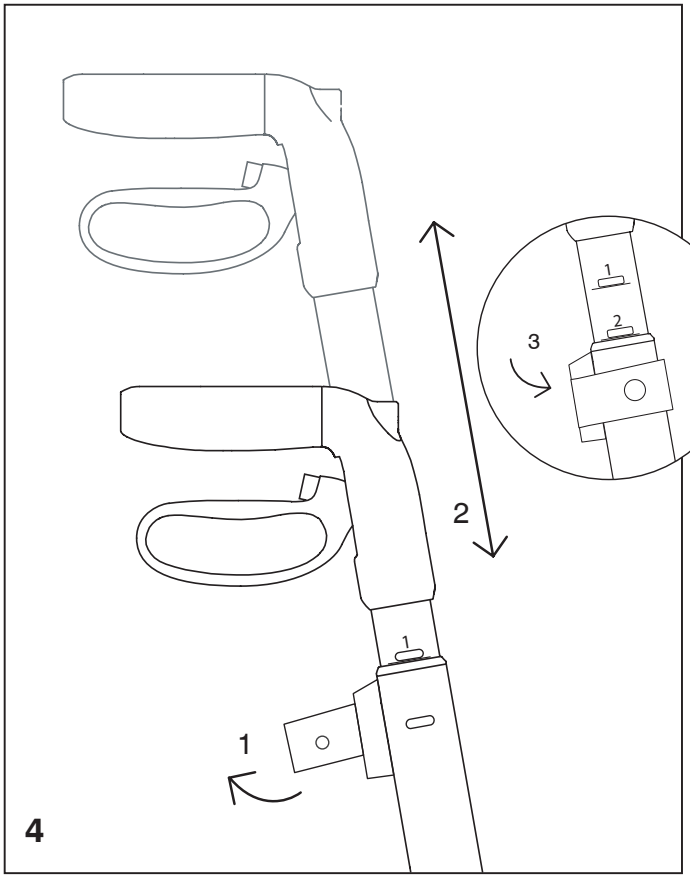
1
2
3
1
2
1
4

## MATERIAL

01. Handgrip - TPR
02. Handle Tube - Aluminum
03. Seat Holders - Steel
04. Frame - Aluminum
05. Front Fork - PA6 + 30% GF
06. Rear Fork - PA6 + 30% GF
07. Tires - TPR
08. Wheel rim - PP
09. Seat - PVC + Nylon
10. Bushing for handle - PA
11. Folding cross - Steel

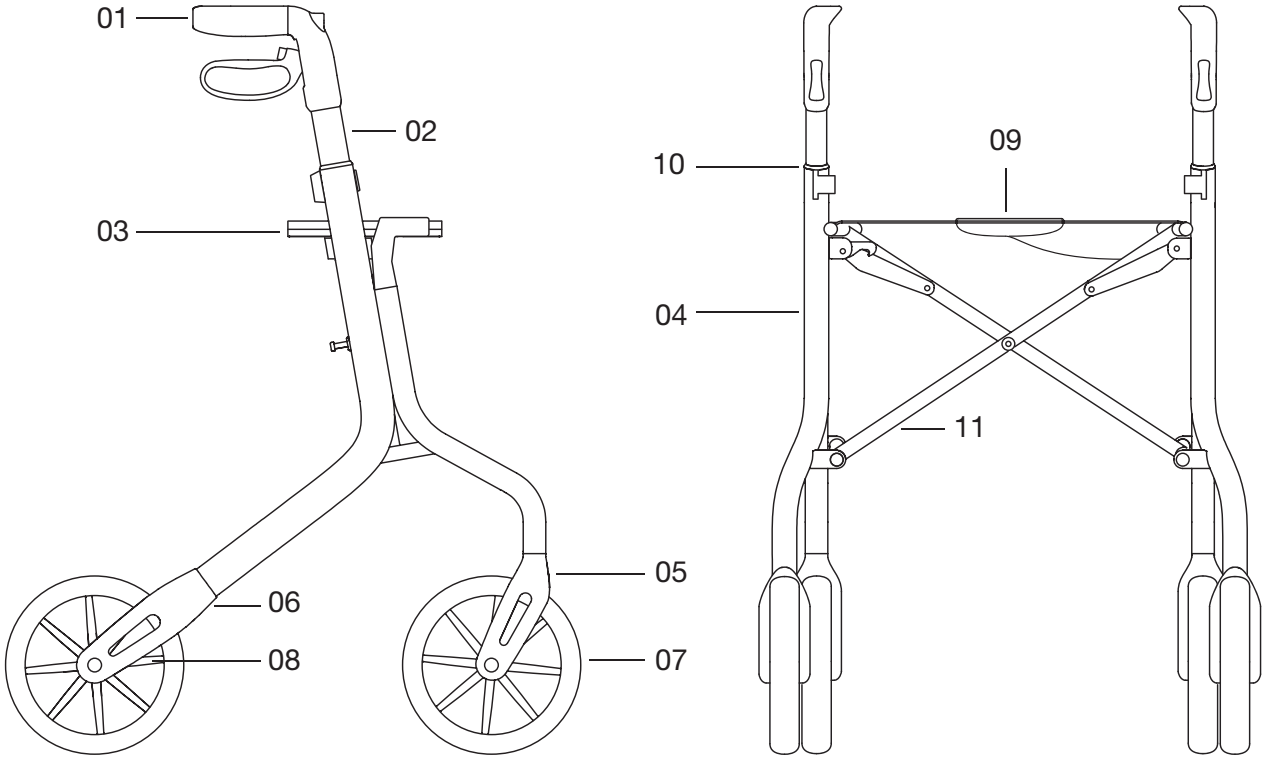


**Återvinning / Genbrug / Recycling / Recycling / Recycling / Riciclaggio / Recyclage**

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.
Dette produkt skal genbruges i overensstemmelse med nationale retningslinjer.
This product should be recycled in accordance with national guidelines.
Dit product moet worden gerecycled in overeenstemming met de nationale richtlijnen. Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Richtlinien recycelt werden.
Questo prodotto deve essere riciclato in conformità con le linee guida nazionali.
Ce produit doit être recyclé conformément aux directives nationales.

# ENGLISH

**Let's Move Again Outdoor Walker.**

We congratulate you on your new rollator, Let's Move Again, that will make your life a little easier, more pleasant and more safe. To make it easier for you to get familiar with your rollator it is important that you study this manual. The rollator helps you to walk and move outdoors. You can also use it to sit on when you want to rest during a walk. Then do not forget to activate the parking brake – position 3 on the picture to the right. To cross curbs and other obstacles, walk in a straight angle to the curb for the rollator not to become unsteady as it crosses the edge. The seat is designed only to sit on, not for transport of for instance children or objects. Do not put heavy objects like large boxes, pieces of furniture etc. on the seat.

Fold the rollator for transport. Ensure that the rollator is properly secured during transport. Take extra precautions to secure the equipment during transport, if necessary.


**Maintenance**
Clean the rollator with lukewarm water and a little detergent. Don't put the rollator in hot places or where it is very damp.

**Warranty**
We provide a two-year warranty. The warranty covers manufacturing defects and does not apply in cases of abnormal wear or misuse. Wear parts such as cables and wheels are not covered by the warranty.


**How to unfold**
(See pictures on page 2!)
1. Rollator standing. Unfold the rollator by pushing the two sides apart from each other.
2. Make sure that the rollator is fully unfolded and the locking hook under the seat snaps in place.

**How to fold**
3. Lift the seat in the middle and the locking hook under the seat is released and the rollator is folded. Press the sides together if needed.

**Handle height adjustment**
4. Release the adjustment lock, align the height with the tube's indicators, and fasten the lock back. (Picture 4 page 2!)

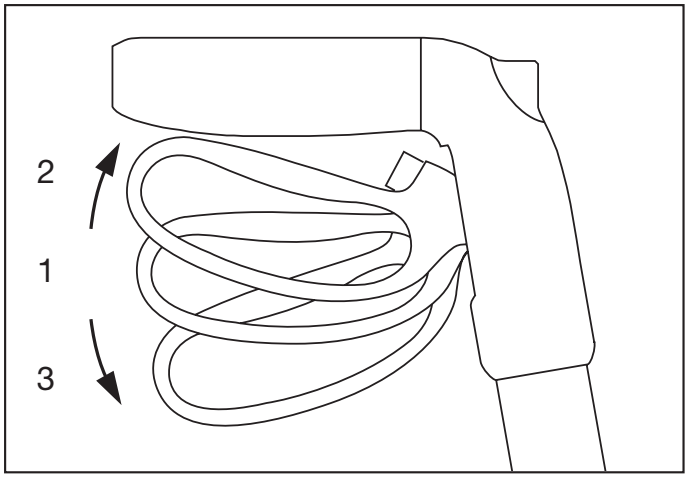


**Brake functions**
1. In position 1 the rollator is rolling freely.
2. To brake the rollator pull the handle up to position 2.
3. For parking brake push handle down to position 3, where the brake locks.

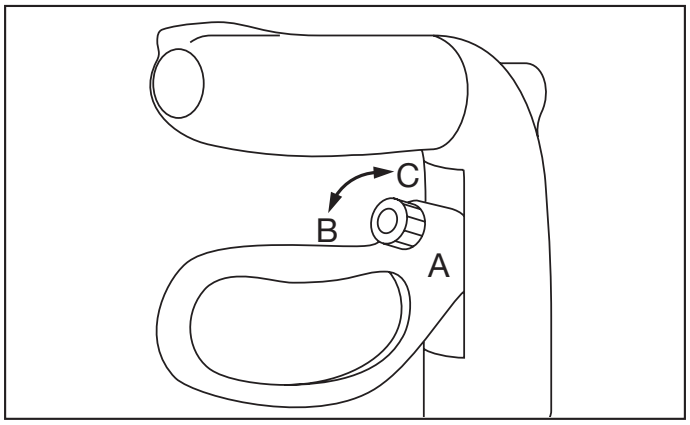


**Brake adjustment**
1. The brakes are adjusted with the adjustment screw at the brake handle (A).
2. Adjustment of the wire tension is done by turning the adjustment screw (B-C).
If the brake is too loose, turn in direction (C). If the brake is to hard turn in direction (B).

Tested according to ISO 11199-2:2005
for a maximum user weight of 130 kg.

CE

| | |
|---|---|
| Max. width | 58 cm. |
| Length | 65 cm. |
| Weight | 5.4 kg. |
| Adjustable handle height | 78 – 93 cm. |
| Seat height | 60 cm. |
| Front wheel diameter | 20 cm. |
| Rear wheel diameter | 20 cm. |
| Max. bag load | 12 kg. |

# SVENSKA

**Let's Move Again utomhusrollator.**

Vi gratulerar dig till din nya rollator, Let's Move Again, som kommer att göra livet lite enklare, bekvämare och säkrare.
För att göra det lättare för er att bli bekant med rollatorn är det viktigt att ni studerar denna bruksanvisning noga. Rollatorn hjälper er att gå och röra er utomhus. Ni kan också använda den att sitta på vid vila under en promenad. Glöm i så fall inte att aktivera parkerings bromsen innan – läge 3 på bilden till höger. För att korsa trottoarkanter och andra hinder, gå i rät vinkel mot trottoarkanten för att rollatorn inte ska bli ostadig då den korsar kanten. Sitsen är avsedd endast för att sitta på, inte för att transportera exempelvis barn eller föremål. Placera inte tunga föremål som stora lådor, möbler eller liknande på sitsen.

Fäll ihop rollatorn för transport. Se till att rollatorn är ordentligt säkrad under transporten. Vid behov, vidta extra försiktighetsåtgärder för att säkra utrustningen under transporten.


**Skötsel**
Rengör rollatorn med ljummet vatten och lite rengöringsmedel. Ställ inte rollatorn på ställen där det är hett eller fuktigt.

**Garanti**
Vi erbjuder två års garanti. Garantin omfattar felaktigheter i tillverkning och gäller ej vid onormalt slitage eller felanvändning. Slitagedelar som vajrar och hjul omfattas inte av garantin.


**Utfällning**
(Se bilder på sidan 2!)
1. Ställ rollatorn upp. Fäll ut genom att dra sidorna från varandra.
2. Kontrollera att rollatorn är helt utfälld och att lås - kroken under sitsen hakar fast.

**Hopfällning**
3. Lyft sitsen i mitten så att låskroken under sitsen hakas loss och rollatorn fälls ihop. Tryck sidorna mot varandra om det behövs.

**Handtagshöjdjustering**
4. Lossa justeringslåset, ställ in önskad höjd med hjälp av rörets indikatorer och fäst sedan tillbaka låset (Bild 4 sida 2!)

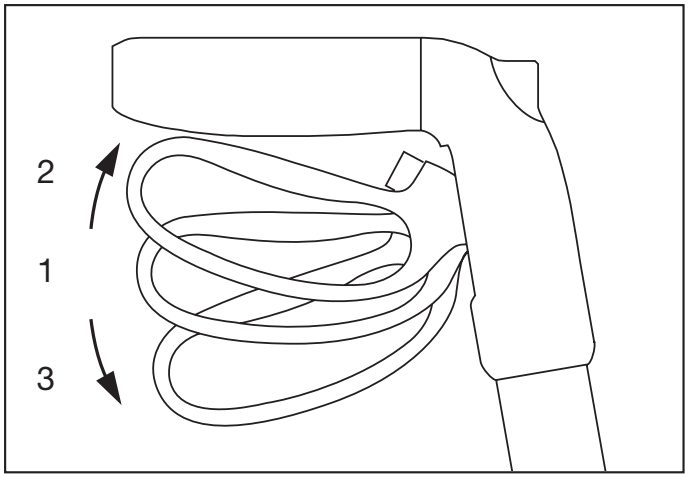


**Bromsfunktioner**
1. I läge 1 rullar rollatorn fritt.
2. För att bromsa rollatorn, dra handtaget uppåt till läge 2.
3. För att parkera, tryck handtaget nedåt till läge 3, där bromsen låser.

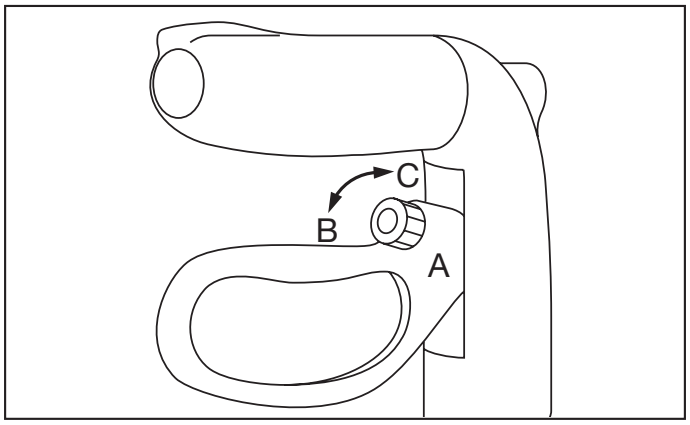


**Justering av broms**
1. Bromsarna justeras med justeringsskruven vid bromshandtaget (A).
2. Vajerspänningen justeras genom att man vrider justeringsskruven (B-C).
Om bromsen är för lös, vrid i riktning (C). Om bromsen är för hård, vrid i riktning (B).

**Tekniska data:** CE

Testad enligt ISO 11199-2:2005 för en maximal användarvikt på 130 kg.

| | |
|---|---|
| Max. bredd | 58 cm. |
| Längd | 65 cm. |
| Vikt | 5.4 kg. |
| Handtagshöjd justerbar | 78 – 93 cm. |
| Sitthöjd | 60 cm. |
| Framhjulsdiameter | 20 cm. |
| Bakhjulsdiameter | 20 cm. |
| Max last i väskan | 12 kg. |

# DANSK

**Let's Move Again udendørs rollator.**

Vi ønsker dig tillykke med din nye rollator, Let's Move Again, som vil gøre livet lidt nemmere, mere behageligt og mere sikkert. For at gøre det nemmere for dig at blive fortrolig med rollator, er det vigtigt, at du læser denne manual. Rollatoren hjælper dig med at gå og bevæge dig udenfor. Du kan også bruge den til siddepause under en gåtur. Husk at aktivere parkeringsbremsen først - position 3 på billedet til højre. For at krydse kantsten og andre forhindringer skal du flytte rollatoren vinkelret på kantstenen, så rollatoren ikke bliver ustabil, når den krydser kanten. Stolen er kun beregnet til at sidde på, og ikke til transport, såsom børn eller objekter. Undlad at placere tunge genstande såsom store kasser, møbler eller lignende på sædet.

Rollatoren kan klappes sammen for transport. Det er vigtigt at rollatoren er korrekt klappet sammen og låst under transport. Det kan være nødvendigt med ekstra beskyttelse for at rollatoren ikke tager skade under transport.


**Pleje**
Rengør rollatoren med lunkent vand og lidt rengøringsmiddel. Stil ikke rollatoren på steder, hvor det er varmt eller fugtigt.

**Garanti**
Vi tilbyder to års garanti. Garantien dækker fabrikationsfejl og gælder ikke ved unormalt slitage eller forkert brug. Sliddele såsom kabler og hjul er ikke omfattet af garantien.


**Fold ud**
(Se billeder på side 2!)
1. Stil rollatoren op. Fold ud ved at trække siderne fra hinanden.
2. Sørg for, at rollatoren er helt udfoldet, og at låse krogen under sædet går i hak.

**Klap sammen**
3. Løft sædet i midten, så krogen under sædet falder ud af hak og rollatoren folder sammen. Tryk på siderne, hvis det er nødvendigt.

**Justering af håndtags højden**
4. Løsn justerings-låsen, og tilpas derefter højden ved brug af markeringerne på røret. Lås igen ved den ønskede højde (se side 2, billede 4).

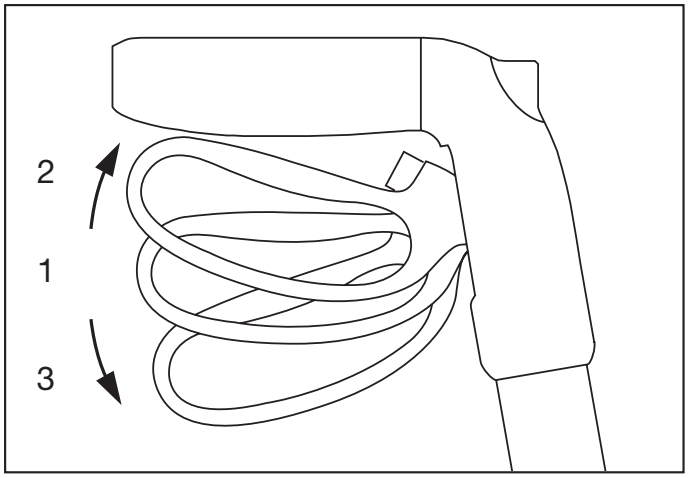


**Bremse funktioner**
I tilstand 1 ruller rollatoren frit.
For at bremse rollatoren, trækkes i håndtaget op til position 2.
For at parkere, skal du skubbe håndtaget ned til position 3, hvor bremsen låses.

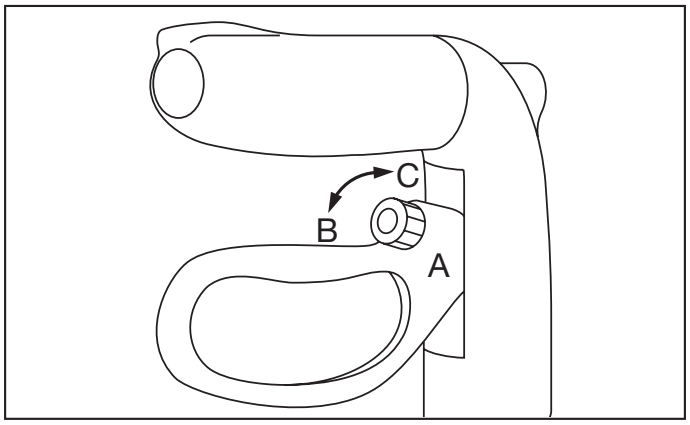


**Justering af bremsen**
Bremserne justeres med justeringsskruen ved bremsegabet (A). Wire spændingen justeres ved at dreje på justerskruen (B-C).
Hvis bremsen er for løs, drejes der i denne retning (C). Hvis bremsen er for hård, drejes der i denne retning (B).

**Teknisk data:** CE

Testet i henhold til ISO 11199-2:2005 for maksimal brugervægt på 130 kg.

| | |
|---|---|
| Max. bredde | 58 cm. |
| Længde | 65 cm. |
| Vægt | 5.4 kg. |
| Højdejustering af skubbehåndtag | 78 – 93 cm. |
| Sædehøjde | 60 cm. |
| Forhjul diameter | 20 cm. |
| Baghjul diameter | 20 cm. |
| Taske kapacitet | 12 kg. |

## NEDERLANDS

**Let's Move Again rollator voor gebruik buitenshuis.**

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe rollator. Let's Move Again maakt uw leven iets gemakkelijker, veiliger en zorgt voor meer comfort. Voor het gebruik van de rollator is het van belang dat u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorneemt. De rollator helpt u om buitenshuis beter te kunnen lopen. U kunt hem ook gebruiken als zitplaats tijdens de wandeling. Vergeet dan echter niet om eerst de parkeerrem te activeren – stand 3 op de afbeelding rechts. Voor het passeren van stoepranden en andere hindernissen, loopt u in een rechte hoek richting trottoirkant, zodat de rollator niet in schuine positie komt. De zitting is alleen bedoel om op te gaan zitten, dus niet voor het transport van kinderen of voorwer pen. Plaats geen zware voorwerpen zoals dozen, meubels of iets dergelijks op de zitting van de rollator.

Vouw de rollator op voor transport. Zorg ervoor dat de rollator goed geplaatst is tijdens transport. Neem, indien nodig, extra voorzorgsmaatregelen om de rollator vast te zetten tijdens het transport.


**Onderhoud** U kunt de rollator reinigen met niet te heet water en eventueel wat afwasmiddel. Zet de rollator niet op een hete of erg vochtige plaats.

**Garantie** Wij bieden twee jaar garantie. De garantie dekt fabricagefouten en is niet van toepassing bij abnormale slijtage of verkeerd gebruik. Slijtdelen zoals kabels en wielen vallen niet onder de garantie.


**Uitvouwen** (Zie de afbeeldingen op pag. 2)
1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de wielen. Vouw de rollator uit door de beide zijkanten van elkaar af te bewegen.
2. Verzeker u ervan dat de rollator geheel uitgeklapt is en dat de vergrendelhaak onder de zitting vastgeklikt is.

**Opvouwen** 3. Trek de zitting in het midden omhoog; de vergrendelhaak onder de zitting zal loskomen en de rollator wordt opgevouwen. Duw zonodig de zijkanten meer naar elkaar toe.

**Hoogteverstelling**
4. Maak de instelvergrendeling los, lijn de hoogte uit met de indicators op van de buis en maak de vergrendeling weer vast. (Afbeelding 4 pagina 2!)

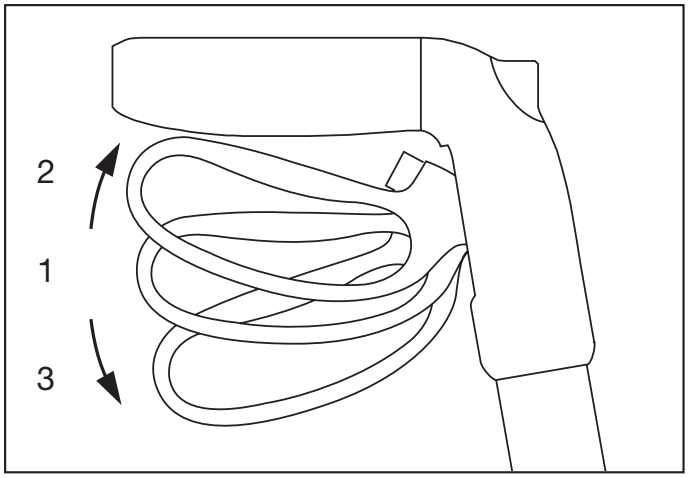


**Remfunctie**
1. Remhandgrepen in positie 1: de wielen kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgrepen omhoog naar positie 2.
3. Parkeerremmen: duw de remhandgrepen geheel omlaag naar positie 3.

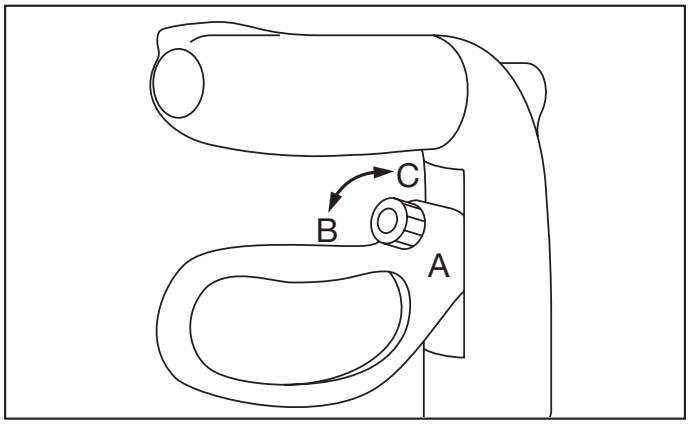


**Remmen afstellen**
1. De remkracht wordt ingesteld met de stelschroeven op de remhandgrepen (A)
2: Draai de stelschroeven linksom of rechtsom tot de remkracht ingesteld is zoals gewenst. Door de stelschroef in de richting B te draaien wordt de remkracht groter.
Als u de stelschroef in de richting C draait vermindert de remkracht.

**Technische gegevens:** CE

| | |
|---|---|
| Getest volgens ISO 11199-2:2005 voor maximum gebruikersgewicht 130 kg. | |
| Grootste breedte | 58 cm. |
| Lengte | 65 cm. |
| Gewicht | 5.4 kg. |
| Aanpassen hoogte handgreep. | 78 – 93 cm. |
| Zithoogte | 60 cm. |
| Diameter voorwielen | 20 cm. |
| Diameter achterwielen | 20 cm. |
| Belasting tas (optioneel). | 12 kg. |

# FRANÇAIS

**Déambulateur Let's Move Again pour utilisation à l'extérieur.**

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau déambulateur Let's Move Again. Il vous rendra la vie plus facile, plus agréable et plus sûre. Lisez attentivement ce manuel afin de vous familiariser avec son utilisation. Le déambulateur vous aide à marcher et à vous déplacer à l'extérieur. Vous pouvez également vous asseoir sur l'assise pour vous reposer lors d'une promenade. Dans ce cas, ne pas oublier d'actionner les freins de stationnement - position 3 sur l'image de droite. Pour franchir les trottoirs et autres obstacles, se placer perpendiculairement au bord du trottoir pour que le déambulateur ne se déstabilise pas au moment du franchissement. Le siège est conçu uniquement pour s'asseoir et non pour transporter des personnes ou des objets lourds.

Plier le rollator pour le transport. Veillez à ce qu'il soit correctement sécurisé et prenez, si nécessaire, des précautions supplémentaires.


**Entretien** Nettoyez le déambulateur avec de l'eau pas trop chaude et un petit peu de détergent. Ne pas placer le déambulateur dans un endroit chaud ou un endroit très humide.

**Garantie** Nous offrons une garantie de deux ans. La garantie couvre les défauts de fabrication et ne s'applique pas en cas d'usure anormale ou de mauvaise utilisation. Les pièces d'usure telles que les câbles et les roues ne sont pas couvertes par la garantie.


**Comment déplier** (voir images page 2!)
1. Le déambulateur est fermé droit devant vous. Dépliez le déambulateur en écartant les deux cotés l'un de l'autre.
2. Assurez-vous que le déambulateur soit complète- ment déplié et que l'accroche en dessous du siège soit bien accrochée.

**Comment plier** 3. Soulevez le milieu du siège jusqu'à ce que le déambulateur soit plié. L'accroche en dessous du siège se défait automatiquement. Poussez les deux cotés l'un vers l'autre si cela est nécessaire pour complètement plier le déambulateur.

**Ajuster la hauteur des poignées**
4. Relâchez le verrou de réglage, alignez la hauteur sur les indicateurs du tube, et remettez le verrou en place. (Image 4 page 2 !)

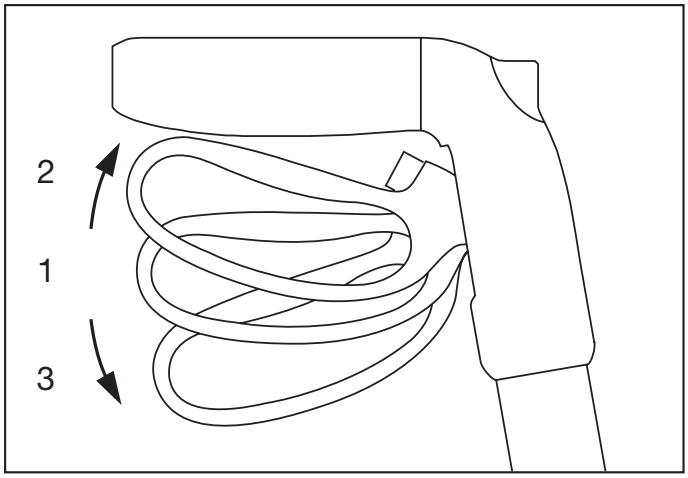


**Fonctionnement des freins**
1. En position 1 le déambulateur roule libre- ment.
2. Pour freiner le déambulateur, tirez la ma- nette vers la position 2.
3. Pour la position freins parking, poussez la manette vers la position 3, jusqu'à ce que la manette soit bloquée.

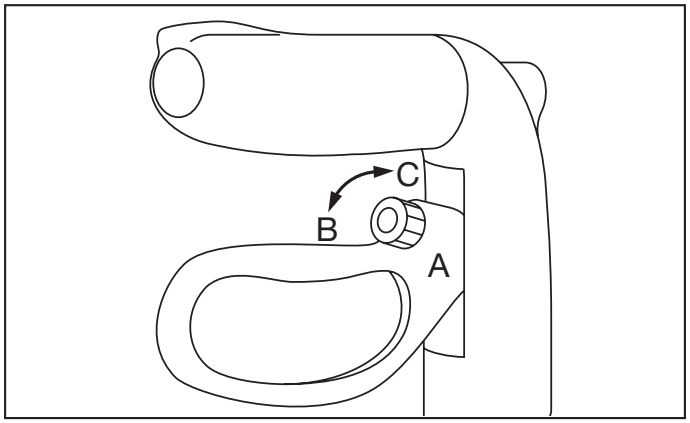


**Réglage des freins**
1. Les freins peuvent être réglé avec les bou- lons de réglage à la manette des freins (A). 2. Pour régler la tension des cables, tournez les boulons de réglage (B-C).
Si le frein est trop détendu, tournez dans la direction (C). Si le frein est trop tendu, tournez dans la direction (B).

**Fiche technique:** CE

| | |
|---|---|
| Testé selon la norme ISO 11199-2:2005 pour un poids max de l'utilisateur de 130kg. | |
| Largeur max. | 58 cm. |
| Longueur | 65 cm. |
| Poids | 5.4 kg. |
| Réglage de la hauteur de la poignée. | 78 – 93 cm. |
| Hauteur du siège | 60 cm. |
| Diamètre des roues avant | 20 cm. |
| Diamètre des roues arrière | 20 cm. |
| Charge max du sac | 12 kg. |

# ITALIANO

**Let's Move Again deambulatore da esterni.**

Ci congratuliamo con lei per il suo nuovo Rollator Let's Move Again, che le renderà la vita più facile, confortevole e sicura. Per familiarizzasi con il Rollator, è importante leggere attentamente e comprendere appieno le presenti istruzioni d'uso. Il deambulatore/Rollator aiuta a camminare e a muoversi fuori di casa. Può essere usato anche per sedersi e riposarsi durante le passeggiate. In questi casi è molto importante ricordare di attivare il freno di stazionamento - posizione 3 nell'immagine a destra. I bordi del marciapiede e altri ostacoli vanno affrontati ad angolo retto affinché il rollator non perda stabilità. La seduta è progettata solo per sedersi e non per trasportare bambini, oggetti o carichi pesanti.

Piegare il deambulatore per il trasporto. Assicurarsi che il deambulatore sia adeguatamente fissato durante il trasporto. Se necessario, adottare ulteriori precauzioni per fissare l'apparecchiatura durante il trasporto.


**Manutenzione** Lavare il deambultatore con acqua calda non bollente e poco detergente. Non mettere il deambulatore in ambiente eccessivamente umidi.

**Garanzia** Offriamo una garanzia di due anni. La garanzia copre i difetti di fabbricazione e non si applica in caso di usura anomala o uso improprio. Le parti soggette a usura, come cavi e ruote, non sono coperte dalla garanzia.


**Come aprire il deambulatore**
(Vedere le figure a pagina 2!)
1. Con il deambulatore in verticale, spingere i due lati uno da una parte e uno dall'altra.
2. Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto e il gancetto di chiusura sotto il sedile faccia "click" nella sua sede.

**Come chiudere il deambulatore**
3.Sollevate la seduta dal mezzo liberando il gancetto di serraggio della parte inferiore del sedile, così facendo si può chiudere. Se necessario fare pressione ai lati.

**Regolazione altezza maniglie**
4. Rilascia la leva di blocco. Allinea l'altezza con gli indicatori sul tubo. Riattiva la leva di blocco per bloccare.

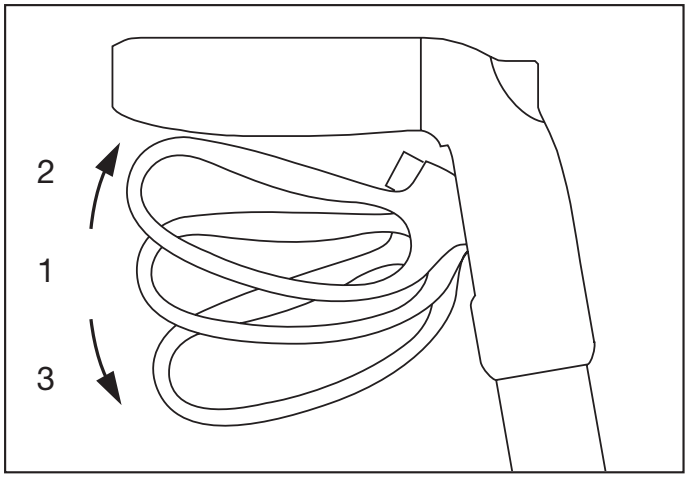


**Funzioni dei freni**
1. Nella posizione 1, il rollator si muove liberamente.
2. Per frenare il rollator, tirare la maniglia verso l'alto fino alla posizione 2.
3. Per il freno di stazionamento, spingere la maniglia verso il basso fino alla posizione 3, dove il freno si blocca.

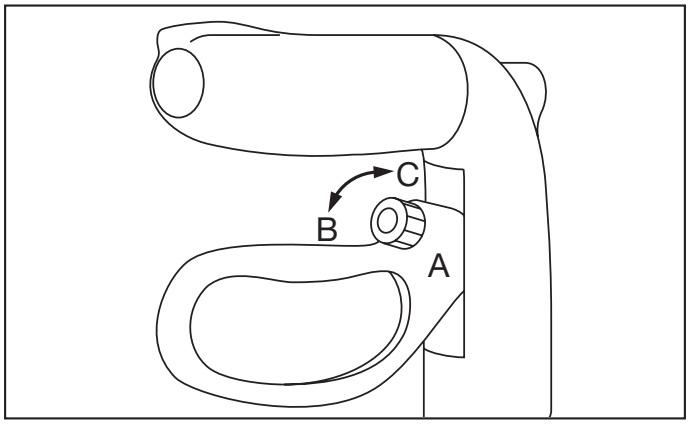


**Regolazione dei freni**
1. I freni si regolano tramite la vite di regolazione situata sulla maniglia del freno (A).
2. La tensione del cavo si regola ruotando la vite di regolazione (B-C).
Se il freno è troppo lento, ruotare in direzione (C).
Se il freno è troppo rigido, ruotare in direzione (B).

**Dati tecnici:** CE

| | |
|---|---|
| Testato secondo ISO 11199-2:2005 per un peso massimo dell'utente di 130 kg. | |
| Larghezza massima | 58 cm. |
| Lunghezza | 65 cm. |
| Peso | 5.4 kg. |
| Altezza regolabile delle impugnature | 78 – 93 cm. |
| Altezza seduta | 60 cm. |
| Diametro ruote frontali | 20 cm. |
| Diametro ruote posteriori | 20 cm. |
| Carico Borsa massimo | 12 kg. |

# DEUTSCH


**Let's Move Again – Der Rollator für den Außenbereich.**

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung sich für unseren Outdoor-Rollator entschieden zu haben. Unser Let´s Move wird Sie sicher und einfach bei all Ihren Aktivitäten begleiten.
Um sich mit diesem Produkt einfach und schnell vertraut zu machen, lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung durch. Durch den Let´s Move Rollator werden Ihre Alltags - bedürfnisse auch im Außenbereich unterstützt. Durch seine Eigenschaften ist es Ihnen möglich während eines längeren Spaziergangs, kurz auf Ihrem Let´s Move Rollator zu verweilen. In diesem Fall ist es notwendig, dass die Bremsen in Parkstellung arretieret sind. Siehe Pos. 3 im Bild rechts. Der Sitz ist nur fürs Sitzen in Parkstellung ausgelegt. Bitte befördern Sie keine Personen, Kinder oder Gegenstände auf Ihrem Let´s Move Again Rollator. Zum Überqueren von Bordsteinkanten oder anderen Hindernissen muss der Rollator in einem rechten Winkel an die Kante herangefahren werden, damit die Stabilität bei der Überquerung nicht beeinträchtigt wird.


Falten Sie den Rollator für den Transport zusammen. Stellen Sie sicher, dass der Rollator während des Transports ordnungsgemäß gesichert ist. Treffen Sie ggf. zusätzliche Vorkehrungen, um den Rollator während des Transports zu sichern.

**Wartung**
Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gewährleisten eine sichere Funktion und einwandfreie Anwendung. Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt sind.

Eine Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen nur original Zubehör- und Ersatzteile von Trust Care verwendet werden. Entfernen Sie keine Bauteile vom Rollator und verwen- den Sie keine Zubehörteile, die nicht von Trust Care zugelassen wurden, da sonst die sichere Funktion des Rollators nicht mehr gewährleistet ist. Nutzen Sie den Rollator nicht in einer besonders heißen Umgebung, z.B. Sauna und nicht in einer feuch- ten Umgebung, z.B. Dusche.

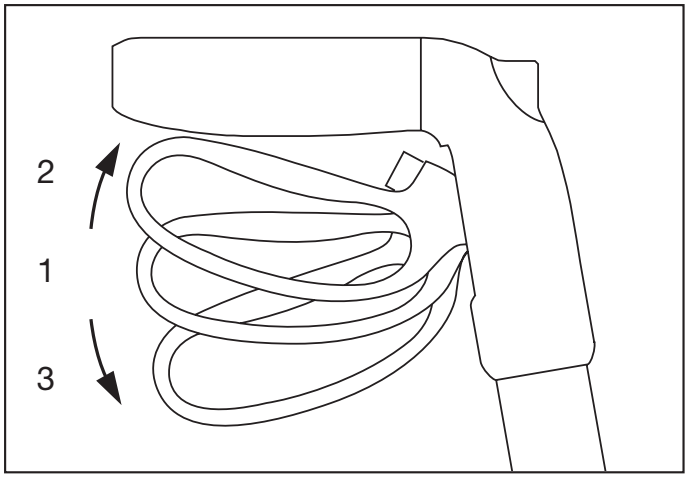


**Funktion der Bremsen**
1. In Position 1 lässt sich der Rollator frei in alle Richtungen bewegen.
2. Um den Rollator zu bremsen, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Position 2.
3. Um den Rollator abzustellen drücken Sie die Bremsgriffe nach unten in Pos. 3. In der Parkstellung rasten die Hebel spürbar ein.

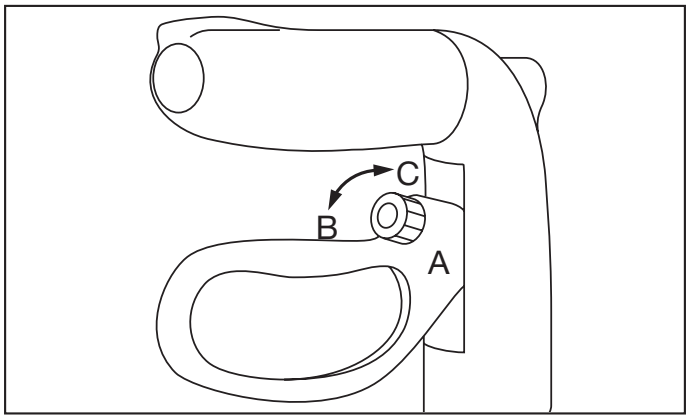


**Einstellung der Bremse**
1. Die Bremsen sind mit einer Schraube ausgestattet, die eine Feineinstellung der Bremsen ermöglicht (A).
2. Durch drehen der Feinstellschraube können sie die Bremswirkung nach Bedarf einstellen (B-C). Wenn die Bremse zu locker ist drehen Sie in Richtung (C). Ist die Bremse zu fest drehen Sie in Richtung (B).

Getestet nach ISO 11199-2:2005 für ein max. Benutzergewicht von 130 kg. CE

| | |
|---|---|
| Max. width | 58 cm. |
| Length | 65 cm. |
| Weight | 5.4 kg. |
| Höhenverstellung der Handgriffe. | 78 – 93 cm. |
| Seat height | 60 cm. |
| Front wheel diameter | 20 cm. |
| Rear wheel diameter | 20 cm. |
| Max. bag load | 12 kg. |

Aus hygienischen Gründen wird eine regelmäßige Rei- nigung des Rollators und des Tabletts empfohlen. Die Reinigung kann mit warmen Wasser und handelsübli- chem Reinigungsmitteln (z.B. „Dax Alcogel“) erfolgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer kompletten Liste geeigneter Reinigungsmittel und – möglichkeiten.

**Vorbereitung für den Wiedereinsatz**
Der Rollator Let´s Move ist nach einer Aufbereitung für den Wiedereinsatz geeignet.
Trust Care empfiehlt vor dem Wiedereinsatz folgende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen:
Prüfen und kontrollieren Sie, ob alle Teile sicher und einwandfrei funktionieren. Defekte oder beschädigte Teile sollten ausgetauscht werden.
Alle Bauteile, die mit Haut in Kontakt kommen sollten desinfiziert werden.

**1. Indikation**
Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken sich auszuruhen oder zu pausieren.

**2. Kontraindikation**
Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei
Wahrnehmungsstörungen
Starken Gleichgewichtsstörungen
Sitzunfähigkeit

**Garantie**
Wir gewähren eine Garantie von zwei Jahren. Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab und gilt nicht bei ungewöhnlichem Verschleiß oder unsachgemäßer Verwendung. Verschleißteile wie Kabel und Räder sind von der Garantie ausgeschlossen.

**Einfaches Aufklappen**
(Siehe Bilder auf Seite 2)
1. Der Rollator ist aufgebaut. Um den Rollator auf zuklappen drücken Sie die beiden
Seiten auseinander.
2. Stellen Sie sicher, dass der Rollator komplett Verschluss, der hörbar einrastet.

**Einfaches Zusammenklappen**
Den Sitz in der Mitte anheben und den Ver- schluss lösen. Der Rollator faltet sich von alleine zusammen. Falls es nötig sein soll drücken sie die beiden Seiten zur Mitte.

**Höhenverstellung**
Lösen Sie die Arretierung der Höhenverstellung, richten Sie die Höhe mit den Markierungen des Rohrs aus, und schließen Sie die Arretierung wieder.
( Abbildung 4 Seite 2!)

# ESPAÑOL

**Andador para exteriores Let's Move Again**

Te felicitamos por tu nuevo andador rollator, Let's Move Again, que te hará la vida un poco más fácil, cómoda y segura. Para que te resulte más fácil familiarizarte con el andador, es importante que estudies detenidamente estas instrucciones. El andador te ayuda a caminar y a moverte en espacios al aire libre. También puedes usarlo para sentarte y descansar durante paseos más largos. Antes de sentarte, no olvides activar los frenos de estacionamiento (posición 3 en la imagen de la derecha). Para cruzar bordillos y otros obstáculos, camina en ángulo recto hacia el bordillo para que el andador no se tambalee al cruzar el borde. El asiento es solo para sentarse, no para transportar, por ejemplo, niños u objetos. No coloques objetos pesados como cajas, muebles o similares sobre el asiento.

Pliegue el andador para su transporte. Asegúrese de que esté bien sujeto durante el transporte. Tome precauciones adicionales si es necesario para asegurar el equipo durante el traslado.


**Mantenimiento** Limpia el andador con agua tibia y un poco de jabón. No coloques el andador en lugares donde haga calor o haya humedad.

**Garantía** Ofrecemos una garantía de dos años. La garantía cubre defectos de fabricación y no se aplica en caso de desgaste anormal o uso indebido. Las piezas de desgaste, como cables y ruedas, no están cubiertas por la garantía.


**Despliegue** (Ver imágenes en la página 2)
1. Coloca el andador en posición vertical. Despliega separando los lados entre sí.
2. Asegúrate de que el andador está completamente desplegado y de que el gancho de bloqueo situado bajo el asiento se engancha.

**Plegado**
3.Sollevate la seduta dal mezzo liberando il gancetto di serraggio della parte inferiore del sedile, così facendo si può chiudere. Se necessario fare pressione ai lati.

**Ajuste de la altura del mango**
4. Suelta el bloqueo de ajuste, alinea la altura con los indicadores del tubo y vuelve a fijar el bloqueo. (Ver imagen 4, página 2)

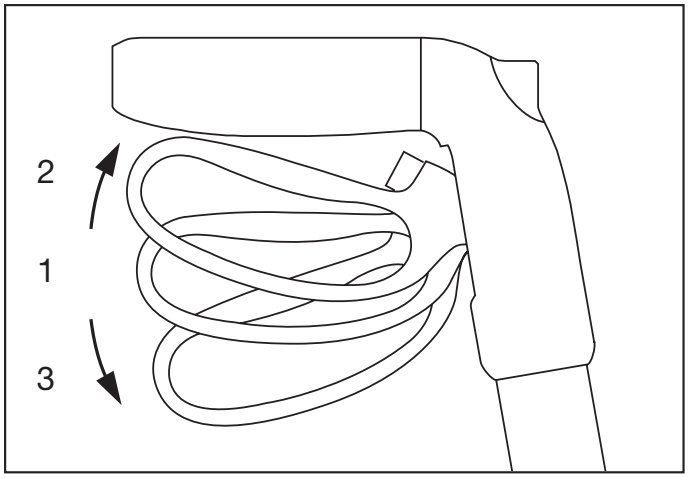


**Funciones de frenado**
1. En la posición 1, el andador rueda libremente.
In position 1 the rollator is rolling freely.
2. Para reducir la velocidad del andador, tira del mango hacia arriba hasta la posición 2.
3. Para aparcar, presiona el mango hacia abajo hasta la posición 3, donde se bloquea el freno.

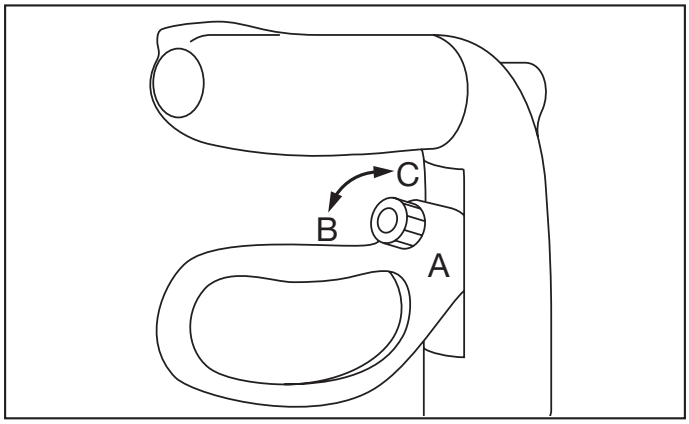


**Ajuste del frenado**
Los frenos se ajustan con el tornillo de ajuste situado en la maneta de freno (A).
Ajusta la tensión del cable girando el tornillo de ajuste (B-C).
Si el freno está demasiado flojo, gira en la dirección (C).
Si el freno está demasiado duro, gira en la dirección (B).

**Datos técnicos:** CE

Probado según la norma ISO 11199-2:2005 para un peso máximo de usuario de 130 kg.

| | |
|---|---|
| Ancho máx | 58 cm. |
| Longitud | 65 cm. |
| Peso | 5.4 kg. |
| Altura del mango ajustable | 78 – 93 cm. |
| Altura del asiento | 60 cm. |
| Diámetro de las ruedas delantera | 20 cm. |
| Diámetro de las ruedas traseras | 20 cm. |
| Carga máxima de la bolsa | 12 kg. |

## Let's Frisbee



## Let's Sing



## Let's Shower



## Let's Enjoy




## Let's Step



## Let’s Dream

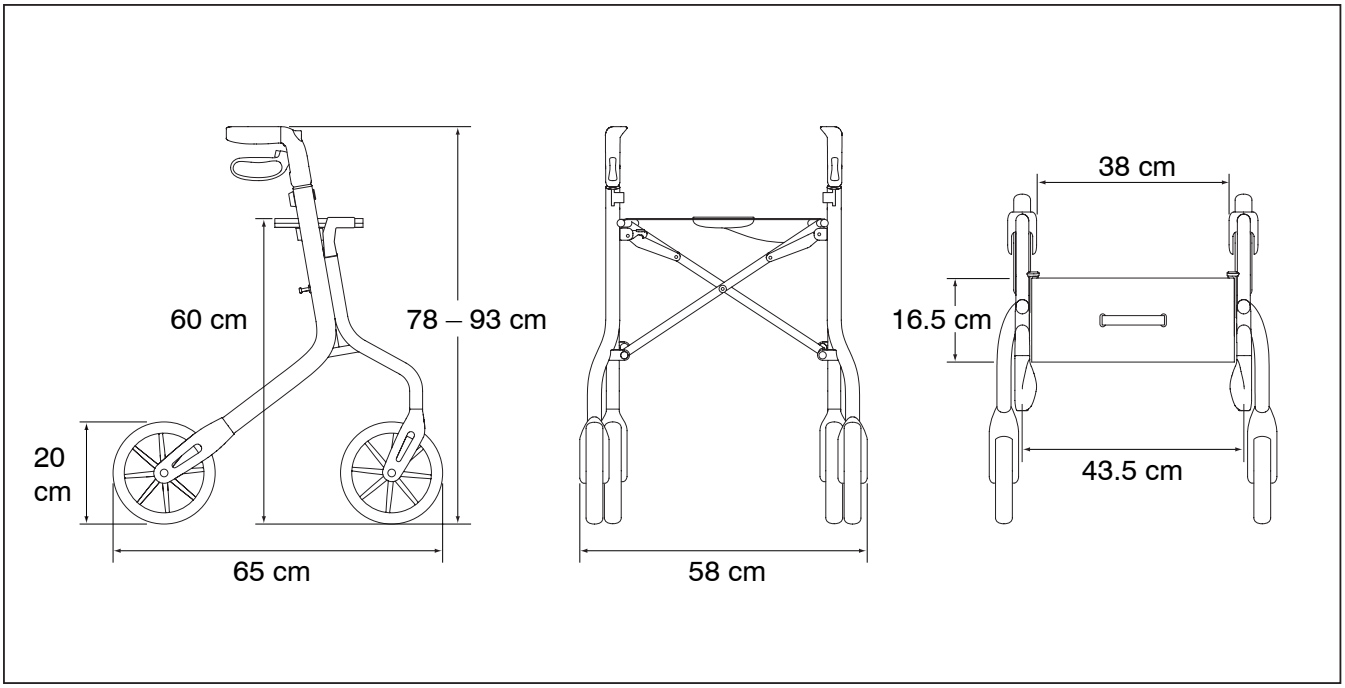


60 cm
78 – 93 cm
20
cm
65 cm
58 cm
38 cm
16.5 cm
43.5 cm




Trust Care
Skrittgatan 8B 21377
Malmoe, Sweden
Tel.: +46 40 15 61 20
info@trustcare.se

www.trustcare.se